

Parasitology Stool Collection Kit

IMPORTANT: Please read and follow instructions before starting.
This collection kit will help you collect a stool sample for parasitic analysis.



1

The collection kit consists of two different vials containing liquid. DO NOT DRINK! Keep out of reach of children and pets.



2

Open kit and fill out: 1) patient name, (2) date and time specimen was collected. Please check the appropriate box for specimen description.



3

Collect the stool in a wide mouth container, bedpan, on a clean newspaper, or in a plastic bag placed over the toilet seat opening. DO NOT pass the specimen into the toilet or directly into the collection vial. Do not expose sample to urine or water.



4

Open the vials carefully. Using the collection spoon attached to the cap, add enough stool until the liquid reaches the ARROW on the label. Fill only one vial at a time and replace the cap onto the same vial. DO NOT mix caps.
IMPORTANT: Sample area of the specimen which appears bloody, slimy, or watery. If the stool is hard, sample from both ends and the middle of the specimen.




5

Ensure the cap is tightly closed and shake the tube vigorously to mix.



6

Wash hands thoroughly with warm water and soap.

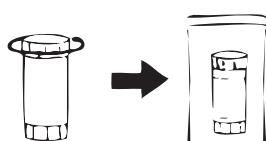

7

Place the vial(s) in the original package and seal. Take specimens at room temperature to the county public health department as soon as possible.



South Carolina Department of Health
and Environmental Control


Equipo para colectar una muestra de heces fecales para un análisis de parásitos

IMPORTANTE: Por favor, antes de comenzar, lea y siga las instrucciones. Este equipo para colectar le ayudará a colectar una muestra de heces fecales para un análisis de parásitos.



1

El equipo para colectar consiste en dos frascos diferentes que contienen líquido. ¡NO LO TOME! Manténgalo alejado del alcance de los niños y mascotas.

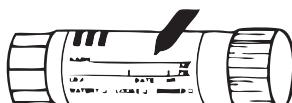


2

Abra el equipo y rellénelo: 1) con el nombre del paciente, 2) escriba la fecha y hora en que la muestra fue colectada. Por favor, marque la casilla que corresponda a la muestra.



3

Colete las heces en un contenedor con boca ancha, en una bacinilla, en un periódico limpio, o en una bolsa plástica sobre el asiento del inodoro abierto. NO DEJE que la muestra caiga en el inodoro o que caiga directamente dentro del frasco. No exponga la muestra a orina o agua.

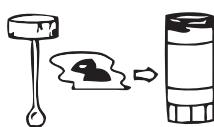

4

Abra el frasco con cuidado. Use la cuchara para colectar que está adjunta a la tapa para añadir suficientes heces fecales hasta que el líquido alcance la LINEA de la etiqueta. Llene un frasco a la vez y ponga la tapa del mismo frasco. NO MEZCLE LAS TAPAS. IMPORTANTE: Meta las áreas de las muestras que parecen tener sangre, están aguadas o con agua. Si las heces fecales son duras, meta una muestra de ambos lados y de la mitad de la muestra.




5

Asegure la tapa y vigorosamente mezcle la muestra al sacudirla.



6

Lávese las manos bien con jabón y agua caliente.

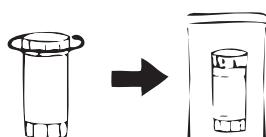

7

Coloque el/los frasco/s en el paquete original y séllelos. Lleve la muestra al laboratorio tan pronto como sea posible.



Departamento de Salud y
Control Ambiental de Carolina del Sur